

Play Skin®

JEDNORAZOWE MASKI
REGENERACYJNE
AKTYWOWANE
MIKROPRĄDAMI Z TWOJEGO
SMARTFONA



TESTOWANE POD KĄTEM
DERMATOLOGICZNYM
NA UNIWERSYTECIE W FERRARZE

REZULTATY:

- ✓ POPRAWA NAPIĘCIA MIĘŚNI TWARZY
- ✓ NATYCHMIASTOWE DOTLENINIENIE I
WYGŁADZENIE SKÓRY
- ✓ NATYCHMIASTOWY EFEKT LIFTINGU

PLAY SKIN® JEST KOMPATYBILNY
ZE SMARTFONAMI Z SYSTEMEM
ANDROID 4.0 ORAZ IOS 9.0, A TAKŻE
Z NOWSZYMI WERSJAMI TYCH
SYSTEMÓW

B A L D A N
G R O U P



B&M Srl
Via L. Bruni 25 - 20158 Milano - Italy
www.playskin.it - www.baldangroup.it

Dystrybucja w Polsce:
Polmax
ul. Łódzka 208B
42-218 Częstochowa
tel. 34 322 00 65, 722 206 132
www.polmax.eu - www.playskin.pl



NIE WYKONUJ ZABIEGU PODCZAS
ŁADOWANIA TELEFONU.



PRZECHOWYWANIE MASEK REGENERACYJNYCH

Przechowuj w miejscu zimnym i suchym.
Nie przechowuj w wysokich temperaturach,
w miejscach wilgotnych i nie wystawiaj na
bezpośrednie światło słoneczne.

GELEKTRODY ŻELOWANE Z PRZEWODEM DO ELEKTROSTYMULACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektrody skórne, kompatybilne z urządzeniami
do elektrostymulacji, służą do przewodzenia
impulsów elektrycznych.

Sprawdź, czy opakowanie elektrod nie jest
uszkodzone. W przypadku zauważenia
uszkodzeń lub wad, nie używaj produktu.

Wybierz obszar na skórze, na którym nie
ma włosów, uszkodzeń, blizn lub fałd, także
nie w pobliżu metalowych protez. Ostrożnie
wyczyść miejsce aplikacji. Nie używaj
rozpuszczalników, gdyż mogą one podrażnić
skórę i osłabić przyleganie elektrod. Podłącz
elektrodę do przewodu elektrostymulacji.

OSTRZEŻENIA

Zdejmuj ostrożnie, aby nie spowodować
podrażnienia skóry. Nie używaj produktu w
przypadku częstego występowania podrażnienia
skóry i alergii kontaktowych.

Nie zakładaj elektrod na skórę z otarciami,
zaczzerwienieniem i ranami.

GWARANCJA I OGRANICZENIA

B&M Srl gwarantuje zgodność produktu z
wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG. Maska
została wyprodukowana zgodnie z procedu-
rami certyfikowanego systemu jakości ISO
13485.

OBSŁUGA ELEKTROD I DWUSTRONNYCH KRAŻKÓW SAMOPRZYLEPNYCH.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dwustronne samoprzylepne krążki są wykona-
ne z materiału samoprzylepnego, dopuszczo-
nego do użytku medycznego; ich celem jest
utrzymanie elektrod w jednej pozycji.

OSTRZEŻENIA

Produkt jest przeznaczony do jednorazowego
użytku i nie wolno wykorzystywać go wie-
lokrotnie. Nie zakładaj elektrod (krążków) na
skórę z otarciami, zaczerwienieniem i ranami.

UWAGA

Play Skin™, przeciwstarzeniowa maska
regenerująca Play Skin™ są zastrzeżonymi
znakami towarowymi, a koncept aplikacji za
pomocą przewodów połączeniowych sta-
nowi wyłączną własność intelektualną B&M
Srl. Z tego powodu Samsung Electronics
Italia S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za
użytkowanie tych produktów w połączeniu z
urządzeniami Samsung.

CZYM JEST PLAY SKIN®?

Play Skin® to rewolucyjny produkt pielęgnacyjny do użytku domowego, który oferuje zaskakujące rezultaty już po 10-minutowym, komfortowym zabiegu w warunkach domowych. Play Skin® łączy efektywność hydrożelowej maseczki upiększającej ze stymulującym i rozluźniającym efektem mikroprądów o bardzo niskim natężeniu, pochodzących z twojego smartfona. Podstawowymi składnikami maski są herbata chińska o stymulującym działaniu, kwas hialuronowy dla efektu napięcia oraz koenzym Q10, który jest naturalnym antyoksydantem. Na zakończenie stosowany jest krem Play Skin® z kwasem glikolowym i teprenonem.

JAK DZIAŁA PLAY SKIN®?











Mikroprądy o bardzo niskim natężeniu są nieinwazyjne i nieodczuwalne. Oddziałują one na poziomie mięśniowym i komórkowym, dzięki czemu poprawiają elastyczność i napięcie skóry, jednocześnie ładując elektrycznie maskę hydrożelową, w celu wzmocnienia działania składników nawilżających i przeciwstarzeniowych produktu.

5-TYGODNIOWA TERAPIA

Stosuj maskę raz w tygodniu lub odpowiednio do potrzeb. Stosuj krem Play Skin® codziennie.

OBSŁUGA

1. Pobierz aplikację Play Skin® ze sklepu internetowego;
2. Zwiąż włosy i oczyść twarz;

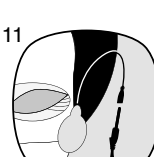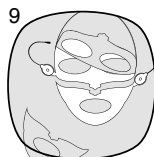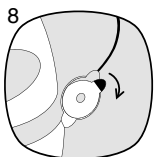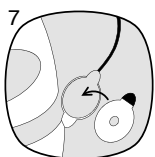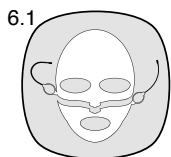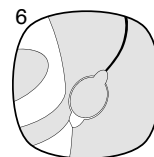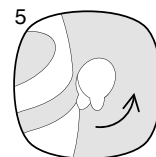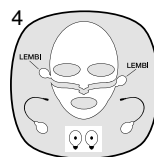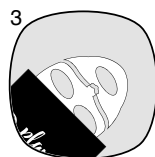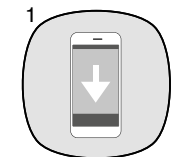

3. Otwórz opakowanie i wyjmij dwie części maski;

4. Połóż obie części na płaskiej powierzchni, jak przedstawiono na ilustracji (folia skierowana w górę);

5. Odklej dwa boczne zabezpieczenia;

6. Odklej elektrody z podkładek i naklej je na odsłonięte przed chwilą miejsca;

UWAGA! Przyklej elektrody z przewodami skierowanymi w górę, jak przedstawiono na ilustracji 6.1;

7. Remove and position the double-sided adhesive discs, and adhere them to the electrodes

8. Remove the protection from the discs to expose the adhesive part

9. Remove the protective films from the mask

10. Put it over your face making sure it is properly adhered;

11. Connect the electrodes to the cable supplied and position the right-side and left-side wires over your ears

12. Podłącz wtyczkę do gniazdka słuchawkowego smartfona;

UWAGA! Aplikacja zasygnalizuje błąd, jeżeli wtyczka została nieprawidłowo podłączona;

13. Wykorzystaj funkcję lustra, aby sprawdzić, czy maska została założona prawidłowo;

14. Rozpocznij zabieg wciskając "Play" i zrelaksuj się przez 10 minut. Dźwięk lub vibracja zasygnalizuje rozpoczęcie programu;

UWAGA! MIKROPRĄDY TWOJEGO SMARTFONA MAJĄ BARDZO NISKIE NATĘŻENIE; SĄ ONE NIEINWAZYJNE I NIEODCZUWALNE.

15. Po zakończeniu zabiegu nałóż krem Play Skin®; stosuj krem Play Skin® codziennie.

